


Het is belangrijk dat uw toestel vrij blijft van oorsmeer, vocht (zweet) en stof/vuil. Omdat hoortoestellen hier dagelijks aan worden blootgesteld, raden wij aan deze op regelmatige basis te reinigen. Reinig daarom dagelijks het dopje op de luidspreker. Onder dit dopje zit tevens een filter die uw toestel beschermt tegen vuil en oorsmeer. Deze filters moeten vervangen worden om verstopping van de hoorapparaten te voorkomen. Uiteraard is dit afhankelijk van de hoeveelheid oorsmeer en is het moeilijk hier een exacte termijn op te plakken waarbinnen de filter vervangen moet worden. Maar indien u vaststelt dat de filter verstopt is of indien u merkt dat de klank van het toestel verminderd is of dat het niet meer werkt, kan u best de filter vervangen.

1. Wat heb je nodig?

Reinigingsspray OF vochtige doekjes, voor dagelijkse reiniging.

Oticon filters: Deze zitten geplaatst op zwart houdertjes in een grijze blister (6 filters per blister).

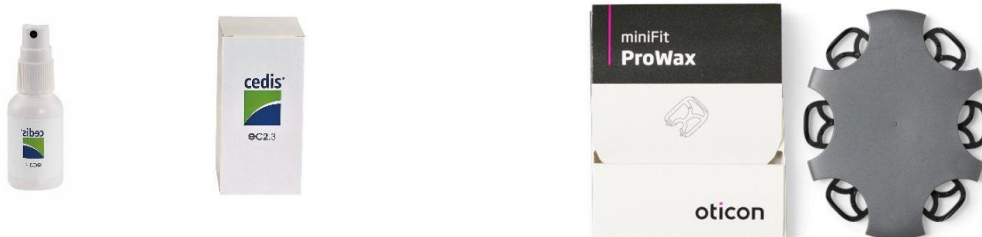

2. Hoe ga je te werk?

Stap 1: Kuis het dopje op de luidspreker af met een vochtig doekje of spuit de spray op een tissue en maak hiermee het dopje proper.

Stap 2: Indien de filter vervangen moet worden, trek dan het dopje weg dat over de luidspreker zit.

Stap 3: Verwijder de vuile filter: Trek een zwart houdertje uit de grijze blister. Het lege pinnetje (korte kant) van het zwarte houdertje past precies in de opening van de filter. Duw het pinnetje recht in deze opening van de filter. Vervolgens trekt u en dan komt de filter eruit, deze blijft op het pinnetje zitten.

Stap 4: Plaats een nieuwe filter, deze zit al klaar op het houdertje: Duw het andere uiteinde (langere kant) met filter recht in de filteropening. Trek vervolgens het houdertje terug recht achteruit. Het witte filtertje blijft dan op de luidspreker van uw hoorapparaat zitten. Het zwarte houdertje mag u weggooien in de vuilnisbak.

Stap 5: Plaats het dopje terug op de luidspreker. Controleer altijd of het dopje goed vastzit!

Bekijk ook zeker eens het filmpje op onze website via onderstaande link:

<https://hoorzorgvanlooveren.org/hoortoestellen/reinigen/>

Wij raden aan minstens 2x per jaar langs het hoorcentrum te komen voor een gratis onderhoud!